

sympress




As easy as pressing a button

Sympress est un **mélangeur automatique** spécialement conçu pour le mélange **rapide** et **facile** de **matériaux à empreinte sous forme de cartouches 5:1**.

Le mélange automatique facilite votre travail au quotidien.

POLYVALENT, FIABLE ET FACILE À UTILISER.

Zhermack 
Dental

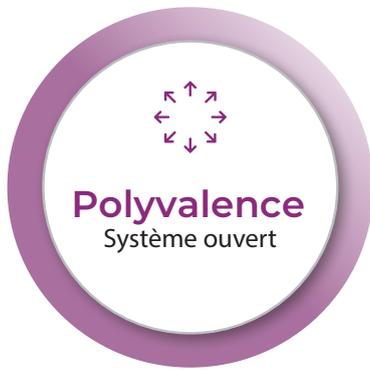

Polyvalence
Système ouvert

- ▶ Compatible avec la plupart des matériaux à empreinte utilisés sur le marché (VPS et polyéther)
- ▶ Utilisable avec des cartouches dures et souples (360 ou 380 ml)



Fiabilité
Se fier à la qualité

- ▶ La qualité allemande à laquelle vous faites confiance*
- ▶ Fonctionnel : un design compact qui empiète peu sur votre plan de travail
- ▶ Faible niveau sonore



Facilité d'utilisation
Travailler intelligemment

- ▶ Facile à utiliser pour offrir le maximum de flexibilité et de confort aux cliniques dentaires
- ▶ Un processus plus rapide pour plus d'efficacité
- ▶ Mélange de façon uniforme et offre un produit d'une meilleure qualité qu'avec le mélange manuel

Essayez Sympress avec nos systèmes 5:1

INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE

qui montre la quantité de matériau dans la cartouche

PANNEAU DE COMMANDE À LED

indiquant si l'appareil est prêt

DEUX VITESSES DE DISTRIBUTION

rapide pour le remplissage d'une porte d'empreinte et plus lent pour le remplissage d'une seringue



CHARGEMENT AUTOMATIQUE

pour une configuration simple

COUVERCLE TRANSPARENT FAÇONNÉ

pour introduire facilement différents types de cartouche

PETITE BASE



L'embout dynamique-statique

permet de réduire jusqu'à 22 % le gaspillage de matière**

Cartouches de 380 ml pour un mélange efficace et homogène.



* Sympress est présenté en partenariat avec Renfert. ** Par rapport aux embouts les plus courants sur le marché utilisés par les concurrents.

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Taille (H x l x L - mm)	Poids (kg)	Alimentation (V/Hz)	Puissance totale (W)
6000-0000	Sympress – 230 V	330x190x380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-1000	Sympress – 120 V	330x190x380	7	120 V ± 10% / 60 Hz	170
6000-2000	Sympress 230 V prise Royaume-Uni	330x190x380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-3000	Sympress 100 V	330x190x380	7	100 V ± 10% / 50 – 60 Hz	170